



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
Oznaczenie arkusza: **MS.18-01-22.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **MS.18**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
Rezultat 1: Etykieta							
Wpisane:							
1	nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu						
2	zawartość pakietu: Zestaw okolicznościowy nr 1						
3	data sterylizacji: data egzaminu						
4	data ważności pakietu: data egzaminu + 1 miesiąc						
Rezultat 2: Pakiet z Zestawem okolicznościowym nr 1 <i>Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4 i 5 otwiera pakiet</i>							
1	Na pakiecie przyklejona etykieta taśmą neutralną						
2	Pakiet jest zaklejony taśmą wskaźnikową i neutralną						
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym						
4	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny						
5	Pakiet zawiera wyłącznie: serwetę chirurgiczną – 1 szt. bandaż zwykły bawełniany – 1 szt. kompresy gazowe 10 cm x 10 cm – 10 szt. fartuch barierowy – 1 szt.						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji

Wpisane:

1	data procesu: data egzaminu nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu						
2	nazwa zestawu: Zestaw okolicznościowy nr 1						
3	nazwa wyrobów medycznych tworzących zestaw, liczba sztuk : serweta chirurgiczna - 1 szt. bandaż zwykły bawełniany – 1 szt. kompresy gazowe 10 cm x 10 cm – 10 szt. fartuch barierowy – 1 szt.						
4	rodzaj bariery sterylnej: papier krepowany/papier krepowany w dwóch kolorach/dwie warstwy papieru krepowanego						
5	typ wskaźnika chemicznego umieszczonego w pakiecie: typ 4 lub 4						
6	metoda sterylizacji: para wodna						
7	parametry procesu sterylizacji (temperatura i czas): 134°C, 7 minut						

Rezultat 4: Protokół niezgodności

Wpisane:

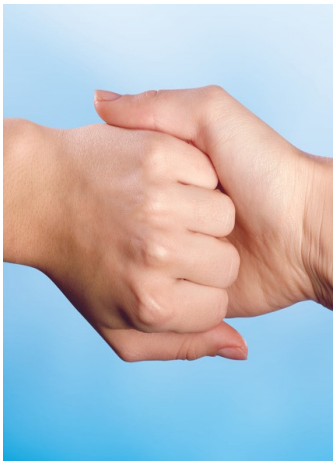
1	opis niezgodności w zestawie (nazwa i ilość wyrobu medycznego): nożyczki chirurgiczne – 1szt.						
2	opis przyczyny niezgodności: wyrób jednorazowego użytku/jednorazowe						
3	podjęte działania (kogo powiadomiono): powiadomiono personel oddziału/kierownika/pielęgniarkę lub zapisany konkretny pracownik Centralnej Sterylizatorni lub utylizacja						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

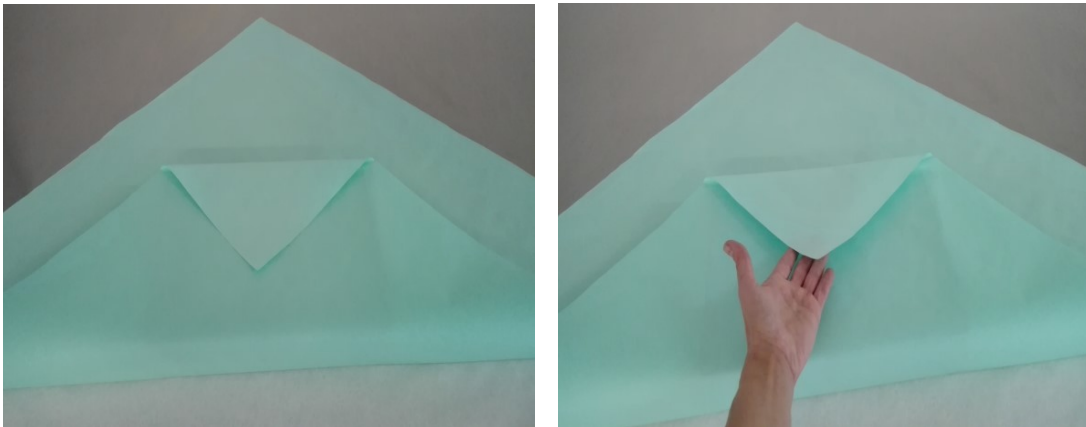
Zdający:

1	naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie						
2	wykonał następnie 6 etapów dezynfekcji rąk, w kolejności:  1  2  3  4  5  6						
3	powtórzył każdy z sześciu etapów dezynfekcji rąk minimum pięciokrotnie						

Przebieg 2: Wykonanie pakietu

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym						
3	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi. Sformułował trójkąt 						
4	pozostawił wypustkę papieru krepowanego zielonego 						

		Numer stanowiska						
5	z papieru białego koloru również sformułował trójkąt (jak w kryterium 3) oraz po kolejnych krokach pakowania pozostawił wypustkę (jak w kryterium 4)							
6	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania							
7	wyrzucił czepek do pojemnika z odpadami							

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis