

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2024
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej**
 Oznaczenie arkusza: **MS.18-01-24.01-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MS.18**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Etykieta***Wpisane:*

1	nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu						
2	zawartość pakietu: Zestaw okolicznościowy nr 1						
3	data sterylizacji: data egzaminu						
4	data ważności pakietu: data egzaminu + 1 miesiąc						

Rezultat 2: Pakiet z Zestawem okolicznościowym nr 1*Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4 i 5 otwiera pakiet*

1	Na pakiecie przyklejona etykieta taśmą neutralną						
2	Pakiet jest zakleiony taśmą wskaźnikową i neutralną						
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym						
4	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny						
5	Pakiet zawiera wyłącznie: serwetę chirurgiczną – 1 szt. fartuch barierowy – 1 szt.						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji*Wpisane:*

1	data procesu: data egzaminu nazwa oddziału: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu/Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu								
2	nazwa zestawu: Zestaw okolicznościowy nr 1								
3	nazwa wyrobów medycznych tworzących zestaw, liczba sztuk : serweta chirurgiczna - 1 szt. fartuch barierowy – 1 szt.								
4	rodzaj bariery sterylnej: papier krepowany/papier krepowany w dwóch kolorach/dwie warstwy papieru krepowanego								
5	typ wskaźnika chemicznego umieszczonego w pakiecie: typ 4 lub 4								
6	metoda sterylizacji: para wodna								
7	parametry procesu sterylizacji (temperatura i czas): 134°C, 7 minut								

Rezultat 4: Protokół niezgodności*Wpisane:*

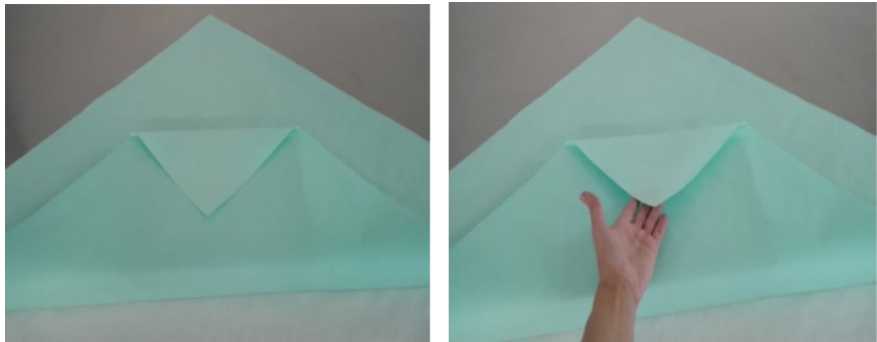

1	opis niezgodności w zestawie (nazwa i ilość wyrobu medycznego): nożyczki chirurgiczne – 1szt.								
2	opis przyczyny niezgodności: wyrób jednorazowego użytku/jednorazowe								
3	podjęte działania (kogo powiadomiono): powiadomiono personel oddziału/kierownika/pielęgniarkę lub zapisany konkretny pracownik Centralnej Sterylizatorni lub utylizacja								

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.**Zdający:*

1	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii (zegarka, bransoletki, pierścionka, obrączki), naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie								
2	wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk wg Ayliffe'a								
3	powtórzył każdy etap dezynfekcji rąk wg Ayliffe'a minimum pięciokrotnie								

Przebieg 2: Wykonanie pakietu
Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym						
3	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi. Sformułował trójkąt						
4	pozostawił wypustkę papieru krepowanego zielonego						
5	z papieru białego koloru również sformułował trójkąt (jak w kryterium 3) oraz po kolejnych krokach pakowania pozostawił wypustkę (jak w kryterium 4)						
6	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
7	wyrzucił czepek do pojemnika z odpadami						

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis